



**LABTRONICS S.A.S**  
CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO

# BH 40P

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO  
VETERINARIO DE 3 PARTES



**SOLO USA  
DOS REACTIVOS**

**VOLUMEN DE REACTIVO  
PARA UNA SOLA MUESTRA**

**Diluyente: 32ml**

**Lisante: 0,4 ml**

## CARACTERÍSTICAS

- Analizador de hematología de 3 partes.
- 42 muestras / hora de cámara única.
- Tamaño compacto y minimizado.
- Sistema de 2 reactivos (diluyente y lisante).
- Sistema de cierre de reactivo RFID opcional.

BH-40P

**URIT**



**FÁCIL DE USAR**




**RESULTADOS  
PRECISOS Y EXACTOS**




**SOFTWARE INTUITIVO,  
DE FÁCIL MANEJO**



**MECANISMOS DE  
ALTA TECNOLOGÍA**

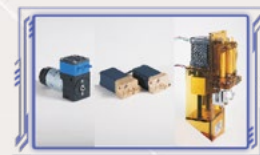

**COSTO / EFECTIVO**

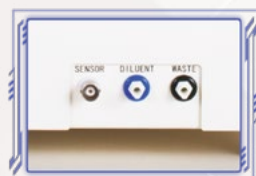

**DE BAJO  
MANTENIMIENTO**



**CERTIFICADO  
INTERNACIONALMENTE**



**SOPORTE TÉCNICO  
PROFESIONAL**



## PARÁMETROS

- 22 parámetros con P-LCC, P-LCR y RBC, WBC, histogramas PLT.
- Rendimiento de hasta 42 muestras por hora con diseño de cámara única.
- Método de impedancia para WBC, RBC y PLT.
- Método de colorimetría fotoeléctrica para HGB con reactivo libre de cianuro.
- Volumen de micromuestra a 13ul para sangre total y 20ul para modo prediluido.
- Capacidad de almacenamiento a bordo de 1.000.000 de resultados de muestras.
- Sistema de cierre de reactivo RFID opcional.
- Cuatro tipos de modos de control de calidad: L-J, X, X-R y X-B.
- Admite copia de seguridad de datos USB actualización del sistema.
- Impresora térmica incorporada.
- LIS y HIS disponibles con protocolo HL7.



WWW.LABTRONICS.NET



Calle 101ª # 47-32 Bogotá, Colombia



Labtronics\_oficial



Labtronics S.A.S.